


**TANDA**

**zap**<sup>TM</sup>

Manual do Usuário

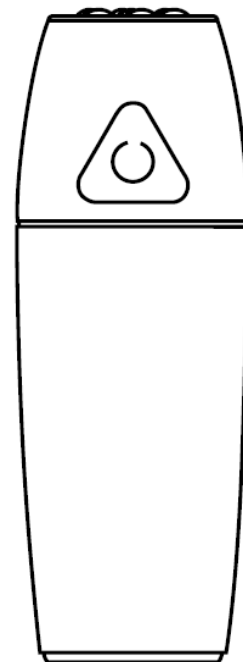


## Obrigada...

por comprar o Zap. Comprovado clinicamente, o dispositivo Zap para tratamento da acne clareia as manchas individuais da acne rapidamente. A poderosa luz LED azul destrói a bactéria causadora da acne, enquanto que a vibração sônica e o leve aquecimento ajudam a abrir os poros de forma que as bactérias não tenham onde se esconder. Sem dor. Sem secura. Sem irritação. E o melhor de tudo, sem espinhas!

## Componentes do dispositivo:

- Cabeça de tratamento Zap (1)
- Luz indicadora (2)
- Botão liga e desliga (3)
- Abertura do compartimento da bateria (4)

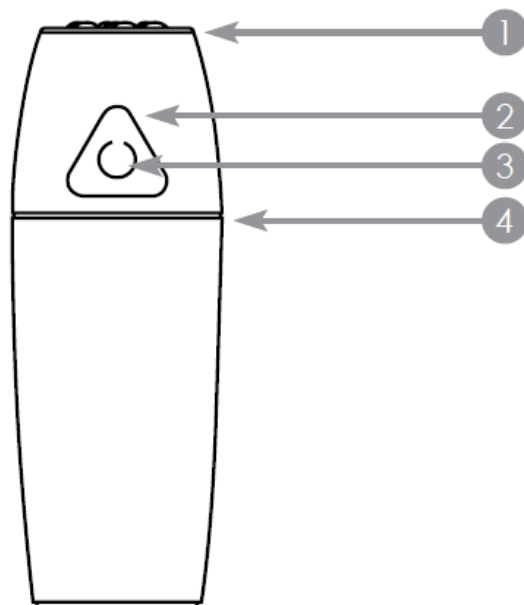



**Atendimento ao cliente:**

(11) 2659-8313 (São Paulo Capital)

(11) 0800-979-2575 (Demais Localidades)

Email: [sac@tanda.com.br](mailto:sac@tanda.com.br)

**Horário de Atendimento:**

Seg-Sex, 9-18h Horário de Brasília

**FABRICANTE****Tanda Beauty Canada Inc.**

11-380 Jamieson Parkway

Cambridge, ON, N3C 4N4

**Detentor Registro Anvisa:**

Neurotechs Comercial Ltda. EPP

CNPJ 65.890.170/0001-34

Nr. Registro Anvisa: 80014449002

## Para que o dispositivo é utilizado?

O Zap é indicado para o tratamento da acne inflamatória leve a moderada (diversas/muitas espinhas (vermelhas) inflamadas). O Zap não agirá na acne cística ou nodular severa.

## Contraindicações

- **CUIDADO! Nunca use** este dispositivo em qualquer lesão que não seja acne leve a moderada. Esse ato pode resultar no atraso do melhor tratamento médico.
- **CUIDADO! Não permita** que crianças com menos de 14 anos utilizem este dispositivo sem supervisão – esse ato pode resultar em lesão aos olhos.
- **CUIDADO! Não utilize** se for sensível à luz.

Isso pode resultar em uma reação de fotossensibilidade. É recomendável que você teste uma parte pequena e menos sensível da pele (por exemplo, seu antebraço).

## Teste de sensibilidade à luz

Siga estas instruções para verificar se você é sensível à luz:

- 1.** Pressione o botão liga e desliga laranja para ligar.
- 2.** O dispositivo irá vibrar e a luz azul de destruição das bactérias se acenderá.
- 3.** Coloque e segure levemente o Zap sobre a parte interna do antebraço durante o ciclo de tratamento de 2 minutos.
- 4.** Pressione o botão liga e desliga laranja novamente para mais 2 minutos de tratamento na mesma área interna do antebraço.
- 5.** Espere 24 horas. Você **NÃO** deve apresentar qualquer reação adversa durante as próximas 24 horas.
- 6.** Uma reação adversa é a dor ou desconforto nas áreas de tratamento ou qualquer vermelhidão prolongada na pele.



- **CUIDADO! Não utilize** se estiver tomando medicamentos que o tornam sensível à luz. Exemplos comuns de medicamentos que o tornam sensível à luz incluem: Anti-histamínicos utilizados para gripe e medicamentos para alergia;  
Medicamentos Anti-inflamatórios não esteroidais (NSAIDs), utilizados para controlar a dor e inflamação; e Antibióticos, incluindo tetraciclinas e sulfonamidas, ou medicamentos “sulfa”.
- **CUIDADO! Não utilize** com unguentos ou pomadas que contenham ingredientes que produzem calor, o que poderia resultar em queimadura da pele.
- **CUIDADO! Não utilize** durante ou próximo a uma injeção de esteroide. Isso pode resultar em uma reação de fotossensibilidade.
- **CUIDADO! Não utilize** sobre ou ao redor dos olhos ou pálpebras, e não olhe diretamente para a luz azul. Isso pode causar lesões sérias aos olhos, incluindo cegueira ou perda temporária da visão, ou uma dor de cabeça.
- **CUIDADO! Não utilizar** sobre a glândula da tireoide (área do pescoço). Isso pode estimular a glândula.



## Advertências

**Advertência:** Para reduzir o risco de choque elétrico que pode causar lesão ou morte:

- Não coloque ou guarde o dispositivo onde ele possa cair em um balde ou pia. Não coloque ou derrube na água ou em outros líquidos.
- Nunca derrube ou insira qualquer objeto em qualquer abertura do dispositivo.
- Utilize apenas as baterias recomendadas para este dispositivo.
- Nunca opere este dispositivo se não estiver funcionando apropriadamente; se tiver caído ou sido danificado ou coberto por água. Envie o dispositivo para a Tanda Beauty Canada Inc. para avaliação e reparo.
- Remova as baterias do dispositivo se prever que ele não será utilizado por um período significativo, como por um mês.
- Não desmonte o dispositivo, uma vez que isso pode causar dano à unidade, funcionamento incorreto, choque elétrico, fogo ou lesão pessoal. Não há peças reparáveis pelo usuário dentro da unidade.

**Advertência:** Para evitar fogo ou possíveis queimaduras:

- 1.** Mantenha longe de qualquer produto aerossol inflamável sendo utilizado ou onde está sendo administrado oxigênio.
- 2.** Desligue o dispositivo se ficar muito quente ao toque, de forma incomum.

**Advertência:** Pare imediatamente se apresentar qualquer efeito adverso ou desenvolver vermelhidão prolongada. Você pode estar apresentando uma reação de fotossensibilidade.

**Advertência:** Este é um dispositivo doméstico. Verifique com cuidado o local aonde será conectado a base energia de seu Zap. Recomendamos utilizar uma fonte segura para o fornecimento de energia.

## Precauções

- Leia todas as instruções antes de usar seu dispositivo Zap.
- Utilize este dispositivo apenas para seu uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não fazer isso pode resultar em atraso no recebimento do tratamento apropriado.
- Descontinue o uso se tiver qualquer desconforto. Você pode ser sensível à luz.
- Não opere este dispositivo em um ambiente no qual estão sendo usados outros dispositivos que intencionalmente

irradiam energia eletromagnética de forma desprotegida. Equipamentos de comunicação por radiofrequência portáteis ou móveis podem afetar o equipamento médico elétrico.

## Como usar

Observe que algumas pessoas são sensíveis à luz. Se achar que pode ser sensível à luz, você não deve usar o dispositivo Zap sem fazer um teste de sensibilidade à luz primeiro. Consulte o teste de sensibilidade descrito na página 3.

Etapas:

- 1.** Pressione o botão liga e desliga laranja para ligar.
- 2.** O dispositivo irá vibrar e a luz azul de destruição de bactérias irá acender. Não olhe diretamente para o feixe de luz.
- 3.** Coloque e segure levemente o dispositivo Zap sobre sua mancha por 2 minutos. Quando a vibração parar, o ciclo de tratamento está completo.
- 4.** Repita 2 a 3 vezes ao dia.

## Indicador de vida do Zap

Você pode interromper o tratamento a qualquer momento pressionando o botão laranja. Se interromper o tratamento dentro dos primeiros 30 segundos, o dispositivo **não** contabilizará o tratamento.

Se interromper o tratamento após 30 segundos, o dispositivo **contabilizará** o tratamento.

Seu dispositivo Zap aplica 1000 tratamentos. Quando seu Zap tiver menos de 50 tratamentos restantes, o botão laranja irá acender uma luz vermelha fixa após cada tratamento para lembrá-lo de que você precisa de um substituto.

Quando seu Zap tiver concluído os 1000 tratamentos, o dispositivo não ligará mais e o botão laranja exibirá uma luz vermelha fixa.

## Indicadores do dispositivo

Vibração fixa e luz azul	O dispositivo está aplicando o tratamento
O botão liga e desliga laranja está piscando em vermelho por 10 segundos após cada tratamento	As baterias do dispositivo estão ficando fracas
O botão liga e desliga laranja fica vermelho fixo por 10 segundos após cada tratamento	O dispositivo tem menos de 50 tratamentos restantes
O dispositivo não liga e o botão liga e desliga laranja está vermelho fixo por 10 segundos	O dispositivo não tem mais tratamentos. É hora de comprar um novo Zap!

## Vida da bateria e substituição


Quando as baterias de seu Zap estiverem baixas, o botão liga e desliga laranja irá piscar em vermelho após cada tratamento como um indicador. Quando for necessária a substituição, utilize pilhas alcalinas AAA.

Seja ecologicamente correto! A Tanda recomenda que você compre um conjunto de baterias AAA recarregáveis.

**Observação:** A vida útil remanescente da bateria pode variar ao utilizar baterias recarregáveis. As baterias de NiMH, compostas por hidreto metálico de níquel, são recomendadas.

### **Para instalar ou trocar as baterias do seu dispositivo Tanda Zap, siga estas instruções:**

- 1.** Vire a parte de cima do dispositivo em sentido anti-horário para alinhar os dois triângulos, localizados no topo e no fundo das 2 seções do dispositivo.
- 2.** Remova as baterias usadas do suporte de bateria.
- 3.** Instale 3 novas baterias AAA de acordo com os símbolos localizados no suporte de bateria.
- 4.** Para fechar o dispositivo Zap, alinhe os dois triângulos, empurre e vire o topo do dispositivo em sentido horário até o triângulo estar alinhado com a linha vertical e ficar seguro.

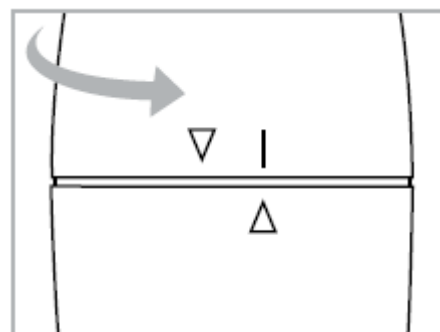

## DESCARTE



Equipamento Elétrico e  
Eletrônico Residual (WEEE)

O Zap é considerado um dispositivo eletrônico e deve ser descartado como qualquer resíduo eletrônico. **Certifique-se de remover e reciclar as baterias usadas de seu dispositivo de acordo com as regulamentações locais.**

### Instruções de limpeza

Utilize um pano úmido, macio e sem pelos e um detergente livre de álcool para limpar a superfície de tratamento Zap.

**Observação:** Nunca coloque o dispositivo dentro da água.

### Garantia

**Registre a garantia de seu dispositivo Tanda Zap em [tanda.com](https://tanda.com)**

É garantido que seu produto Tanda esteja livre de defeitos no material e mão de obra por um período de um ano após a data de sua compra original sob uso normal ou por 1000 utilizações. Essa garantia se estende apenas ao comprador original, com comprovação de compra original e apenas quando adquirido de um vendedor Tanda autorizado ou revendedor.

Se o produto apresentar defeito dentro de período de garantia, no Brasil, ligue para nossa equipe de atendimento ao cliente pelos telefones (11) 2659-8313 (São Paulo Capital) ou (11) 0800-979-2575 (Demais Localidades) ou através do email [sac@tanda.com.br](mailto:sac@tanda.com.br). As informações de contato podem ser encontradas no **tandabrasil.com.br**. Tanda Beauty Canada Inc. se reserva o direito de trocar um produto com defeito pelo produto mais similar disponível atualmente. Seu reparo exclusivo de qualquer produto defeituoso abrangido por esta garantia limitada é limitado ao reparo ou substituição do produto defeituoso. A responsabilidade integral da Tanda Beauty Canada Inc. por qualquer produto defeituoso não deve exceder, em nenhum caso, o preço de compra do produto defeituoso.

Esta garantia não cobre os produtos determinados pela Tanda Beauty Canada Inc. como sendo danificados por qualquer um dos seguintes motivos:

- Acidente, uso indevido, abuso ou alteração
- Serviço realizado por pessoas não autorizadas
- Uso com acessórios não autorizados ou uso diferente do instruído
- Qualquer outra condição fora de nosso controle



NA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, A TANDA BEAUTY CANADA INC. NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO OU INDIRETO RESULTANTE DO USO OU USO INCORRETO DESTE PRODUTO, INCLUINDO QUALQUER DANO GERAL, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL. TODAS AS REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, AS REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE ADEQUAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO SÃO LIMITADAS EM SUA DURAÇÃO ATÉ UM ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA ORIGINAL.

## Especificações

Dispositivo Tanda Zap = TANDA SÉRIE 4

 PEÇA TIPO BF APLICADA

 Atenção consulte DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA



Siga as instruções de uso

**Especificações de operação:** Temperatura ambiente:

5°C a 40°C UR: 15% a 93%, Sem condensação;

**Pressão atmosférica:** 700 – 1060 hPa;

**Especificações Ambientais de Transporte/Armazenamento:**

Temperatura Ambiente: 0 °C a 60 °C; UR: 10% a 90%

## Biocompatibilidade – Declaração de Conformidade

Este dispositivo foi testado em conformidade com os requisitos da ISO 10993 para a biocompatibilidade quando usado na pele intacta para a duração do tratamento recomendado. Os materiais do dispositivo em contato com a pele são biocompatíveis e podem ser utilizadas sem causar problemas de sensibilização, irritação ou efeitos tóxicos.



## **FCC – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:**

**Modelo:** Tanda Zap está em conformidade com a seguinte especificação: FCC Seção 15, Subitem B: 2006.

**Informações Complementares:** Este dispositivo atende à Seção 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo talvez possa causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

## **AVISO DA INDÚSTRIA CANADENSE:**

Este aparelho digital Classe B atende ao ICES-003 canadense.

Direitos autorais © Tanda Beauty Canada Inc. 2012, Tanda e Tanda Zap são marcas registradas Tanda Beauty Canada Inc. Todos os direitos reservados. Patente pendente.

## Observações:

---

---

---

---

---

---

---

---

